

Noodgevallen buiten openingstijden



Noodgevallen

Tijdens onze openingstijden kunt u ons altijd bellen of mailen bij noodgevallen of vragen. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Het kan zijn dat u problemen ervaart buiten onze openingstijden. Wij verzoeken u om niet zelf te sleutelen aan uw voorziening, maar ons te bellen zodra wij weer open zijn.

Help, mijn voorziening is kapot

Bij een kapotte voorziening of losse onderdelen, verzoeken wij u om uw voorziening niet te gebruiken. Maak zo snel mogelijk een afspraak tijdens onze openingstijden.



Help, mijn prothese gaat niet uit

Als uw beenprothese niet meer uitgaat, is de kans groot dat de sok vastzit tussen de pin en de prothese. Dit kan komen doordat de sok niet hoog genoeg opgetrokken is bij het aandoen. In dit geval heeft hard trekken aan de prothese geen nut. U kunt dan deze truc gebruiken om uw prothese toch uit te doen. Hierbij is het handig als iemand u wilt helpen en u uw stomp ontspant. Deze truc werkt ook bij een armprothese, maar let hierbij goed op dat elektronische onderdelen niet nat worden.



Benodigheden:

- Twee handdoeken
- Een glas water
- Zeep (alle soorten mag)
- Iets om mee te roeren

Stappen:

- Stap 1: doe zeep in het glas met water en roer het door.
- Stap 2: leg een handdoek op de grond en doe de andere handdoek om de sok van de prothese heen, zodat de vloer en de prothese niet nat worden. Bij een waterbestendige prothese is de handdoek om de prothese heen niet noodzakelijk.
- Stap 3: giet het zeepwater de liner in. Het water moet tussen de liner en de huid komen.
- Stap 4: zorg ervoor dat het zeepwater diep de liner in loopt en verspreid wordt. Gebruik uw vingers om het water te verspreiden. Giet zo nodig meerdere keren zeepwater in de liner. Hierdoor trekt de liner geen vacuüm meer en laat de prothese uiteindelijk los.
- Stap 5: als de beenprothese uit is, kunt u kijken of u de liner uit de beenprothese kunt loshalen. Zit hij nog steeds vast? Dan heeft trekken geen nut. Maak een afspraak met ons tijdens onze openingstijden, dan halen wij hem los voor u.

Meer informatie

Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

RIJNDAM
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel van De Hoogstraat Orthopedietechniek

Bekijk de video over deze truc op onze website www.rijndam.nl/orthopedietechniek onder de pagina 'Noodgevallen'.




Help, het uittreknopje van mijn prothese is afgebroken

Het kan gebeuren dat het knopje afbreekt, die u moet indrukken om uw prothese uw te doen. In dat geval kunt u uw prothese alsnog uittrekken met behulp van een dun voorwerp.

Stap 1: haal het witte pinnetje uit de knop van de koker.

Stap 2: pak een lang, dun voorwerp, zoals een dunne schroevendraaier of een breinaald.

Stap 3: duw het dunne voorwerp in de knop. De liner met pin klikt daardoor los en u kunt uw stomp uit de koker halen.

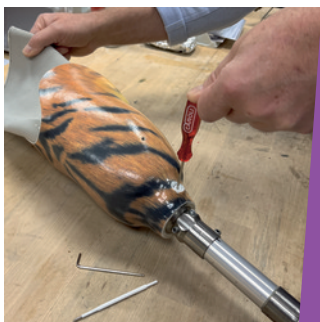

U kunt de prothese gewoon blijven gebruiken, maar maak een afspraak zodra wij bereikbaar zijn om het knopje te laten vervangen.